



## 灭菌筐系统

# 灭菌筐系统

优选解决方案

Richard Wolf 通用灭菌筐系统为灭菌、运输和储存过程中的贵重器械套件提供安全、轻柔的环境。



通用筐理念几乎让所有筐形能够组合在一起。



通过开放式和封闭式硅胶支架，上重下轻的器械也可以牢固地固定

获得专利的双边框构造可防止筐网“磨损”。筐网磨损可能对用户造成伤害并损坏灭菌包装。

因此双边框构造确保了最大的安全性和较长的使用寿命。

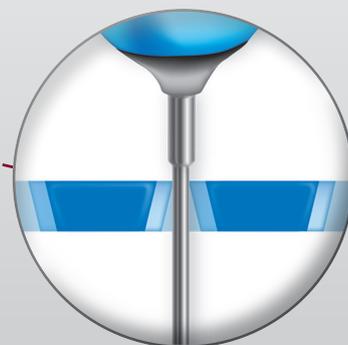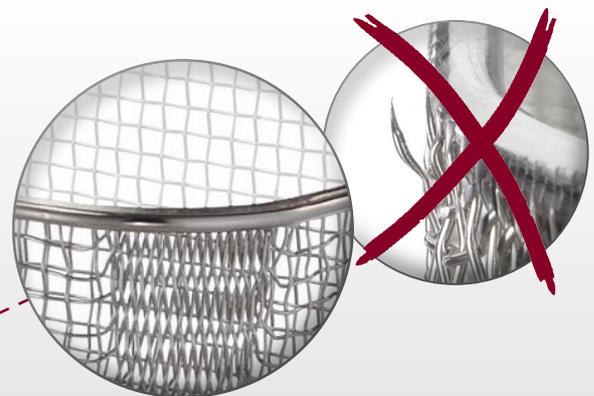

由于硅胶底座采用特殊设计，接触面极小。

# 灭菌筐系统

易于操作和配置

系统视图 ·




高-标准灭菌筐 (8584.1202)和

高-长灭菌筐 (8584.1302)

系统视图 ·

低-标准灭菌筐 (8584.1212)和





低-长灭菌筐 (8584.1312)

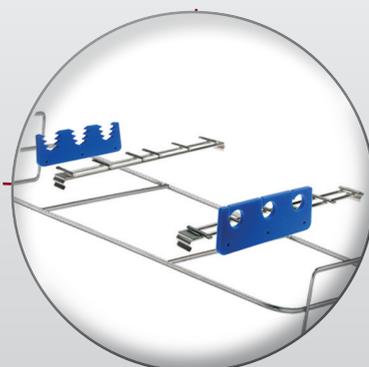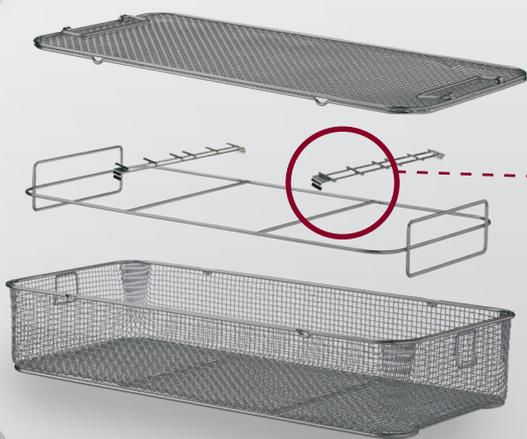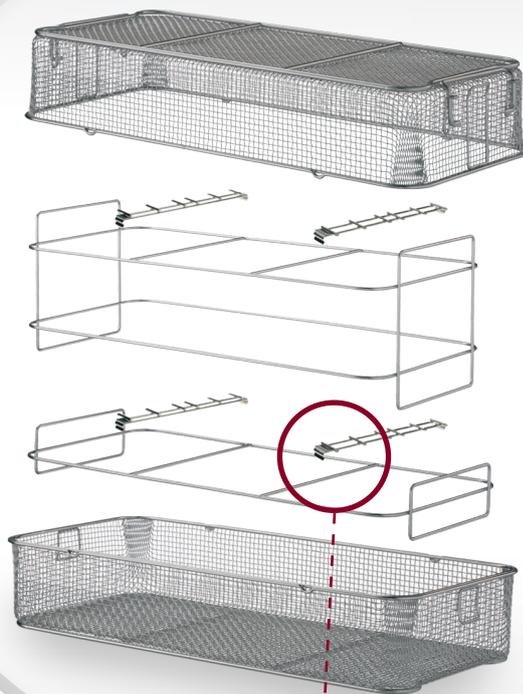

硅胶支架  
(蓝色) 根据  
器械直径单独  
订购。

# 灭菌筐系统


订购信息

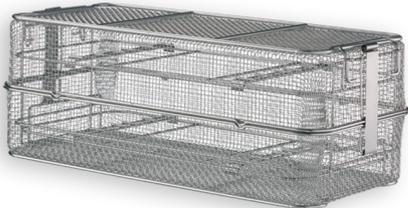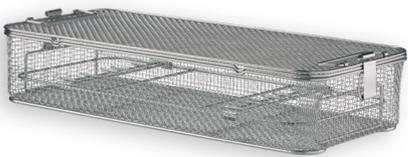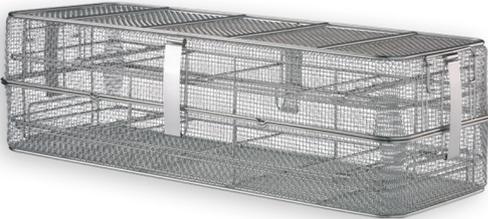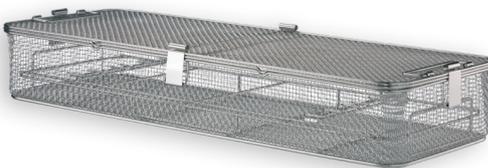图片	名称	型号
	<p><b>高-标准灭菌筐</b> 尺寸 (长 x 宽 x 高) : 530 x 250 x 200 mm 包括: 筐体下部, 高低器械架, 4 根支撑杆, 高筐盖, 带弹簧锁和 2 个手柄</p>	8584.1202
	<p><b>低-标准灭菌筐</b> 尺寸 (长 x 宽 x 高) : 530 x 250 x 108 mm 包括: 筐体下部, 低器械架, 2 根支撑杆, 平筐盖, 带弹簧锁及 2 个手柄</p>	8584.1212
	<p><b>高-长灭菌筐</b> 尺寸 (长 x 宽 x 高) : 725 x 275 x 200 mm 包括: 筐体下部, 低器械架, 4 根支撑杆, 高筐盖, 带弹簧锁和 2 个手柄</p>	8584.1302
	<p><b>低-长灭菌筐</b> 尺寸 (长 x 宽 x 高) : 725 x 275 x 108 mm 包括: 筐体下部, 平器械架, 2 根支撑杆, 平筐盖, 带弹簧锁和 2 个手柄</p>	8584.1312
	<p><b>低灭菌筐</b> 尺寸 (长 x 宽 x 高) : 530 x 250 x 108 mm 包括: 筐体下部, 低器械架, 2 根支撑杆, 平筐盖, 带弹簧锁和 2 个手柄, “大菱形” 硅胶垫</p>	85844001

# 灭菌筐系统

## 配件

图片	名称	型号
	硅胶支架的支撑杆 · 2 根	8584.8203
	<b>硅胶支架 · 封闭式 · 3 孔</b> 用于直径为 8 mm 至 14.5 mm 的器械	8584.9201
	<b>硅胶支架 · 开放式 · 3 孔</b> 用于直径为 8 mm 至 14.5 mm 的器械	8584.9211
	<b>硅胶支架 · 封闭式 · 5 孔</b> 用于直径为 1 mm 至 7.5 mm 的器械	8584.9501
	<b>硅胶支架 · 开放式 · 5 孔</b> 用于直径为 1 mm 至 7.5 mm 的器械	8584.9511
	<b>硅胶支架 · 封闭式 · 7 孔</b> 用于直径为 1 mm 至 7.5 mm 的器械	8584.9701
	<b>硅胶支架 · 开放式 · 7 孔</b> 用于直径为 1 mm 至 7.5 mm 的器械	8584.9711
	<b>硅胶挡板</b> 确保小直径器械的轴向定位	85849005
 3x 8584.9501      1x 8584.9701  3x 8584.9511      1x 8584.9711	<b>启动套件硅胶支架</b> 用于泌尿外科/关节镜 包括：3x 8584.9501、3x 8584.9511、 1x 8584.9701、1x 8584.9711	8584.9001
 3x 8584.9501      1x 8584.9201  3x 8584.9511      1x 8584.9211	<b>启动套件硅胶支架</b> 用于腹腔镜/外科手术/妇科 包括：3x 8584.9501、3x 8584.9511、 1x 8584.9201、1x 8584.9211	8584.9002

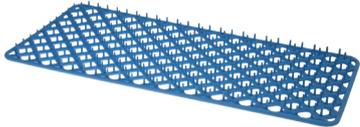图片	名称	型号
	<p><b>系统小零件筐</b> 尺寸 (宽 x 高 x 深) : 121 x 35 x 121 mm</p>	8584.3003
	<p><b>锁定销</b> 例如, 用于固定手柄 每包 2 个</p>	8584.8205
	<p><b>固定支架套件</b> 包括: O 形环套件, 2x 角形托架, 1x 内六角扳手</p>	85848210
	<p><b>O 形环套件 (替换件)</b> 包括: 1x O 形环 90 x 3 mm, 1x O 形环 116 x 3 mm</p>	74002311
	<p><b>“大菱形” 硅胶垫</b> 尺寸 (宽 x 高 x 深) : 500 x 18 x 226 mm</p>	85843010

# 后处理循环



spirit of excellence



规格如有更改，恕不另行通知。

J.609.XI.18.en.6

理查德沃尔夫香港有限公司  
香港九龙旺角弥敦道700号  
弥敦道700号18楼1805-1806室

电话: +852 2187 3446  
传真: +852 2187 3449  
电邮: hongkong@richard-wolf.com  
网站: www.richard-wolf.cn

沃迦夫医疗器械贸易(上海)有限公司  
上海吴淞路218号宝矿国际大厦1107室  
邮编: 200080

电话: +86 21 6325 7830  
传真: +86 21 5651 2336  
电邮: shanghai@richard-wolf.com  
网站: www.richard-wolf.cn

