

尺寸至关重要



PRINCESS

纤细的 7 mm 电切镜，可最大程度
减少扩宫工作


PRINCESS

纤细的 7 mm 电切镜，
可最大程度减少扩宫工作

Princess 宫腔电切镜是 Richard Wolf 独有的外径仅 7 mm 的超细电切镜，与 12° PANOVIEW 宫腔镜配合使用。小尺寸可进行非常精细且准确的切除，大幅减少扩宫工作，降低插入阻力。由于所需空间减小，宫内压可以保持在一个相当低的水平。因此，减少了液体吸收和流失。

Princess 宫腔电切镜的小尺寸尤其适用于

- 狭窄的宫颈管
- 生育和不孕患者

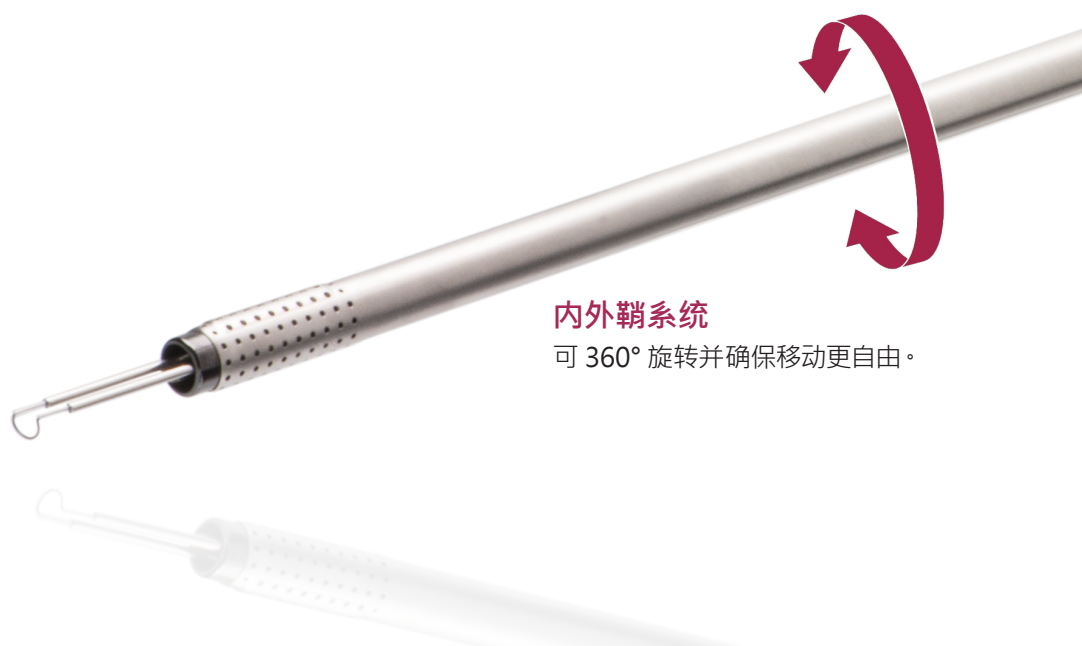


内外鞘系统

可 360° 旋转并确保移动更自由。



经典的电切镜

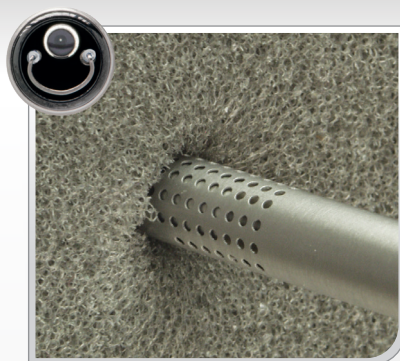

7 mm Princess 电切镜

尺寸至关重要


- 减少扩宫工作
- 显著降低插入阻力
- 大幅降低对宫颈管的创伤




器械采用混合技术·支持单、双极应用。

双极汽化电极 “BiVAP”

新型 **BiVAP** 双极汽化电极是子宫内膜切除术和子宫肌瘤治疗的理想选择。**7 mm Princess** 系统显著减少了空间需求·令人印象深刻。

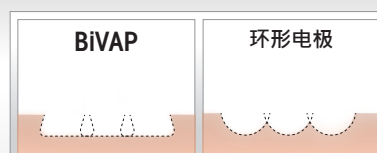



- 优化的电极形状
- 接触面增大·能量密度低

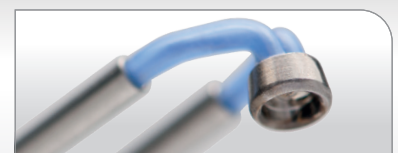

- 快速有效的组织汽化
- 以独特的形状集中等离子体

尺寸	型号	外鞘	内鞘	带开放手柄的工作手件		内窥镜 直径 2.7 mm 12°	闭孔器	
				被动切割	主动切割		可视闭孔器	闭孔器
7 mm	硬性	8653.021	8653.018	8653.224	8653204	8974.412	865319	8653.18
	可旋转	8653022	8653019					
8 mm	可旋转	8655.334	8655.344					8654.16

电极

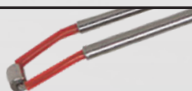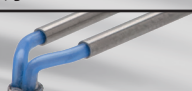		多用型	7 mm	8 mm	型号
	双极、每包 3 个、无 菌独立包装		●		4653.1313
	单极	●	●		8653.131
	双极、每包 3 个、无 菌独立包装			●	4653.1323
	单极	●		●	8653.132
	双极、每包 3 个、无 菌独立包装		●	●	4653.023
	单极	●	●	●	8653.02
	单极和双极	●	●	●	865303
	双极、每包 3 个、无 菌独立包装		●		4653.0213
				●	4653.0243

可选配件

工作插件 · 适用于不超过 7 Fr 的
辅助器械 8653284

高频双极连接电缆
适用于 Martin, 3 m 8108.231
适用于 Erbe, 3 m 8108.232

软性纤维导光束
纤维束直径 Ø 2.5 mm
(绿色标记),
长度 2.3 m 806625231

灭菌保护套
用于电极 8428.901

RIWO 系统收纳盒
器械盒 · 400 × 60 × 200 mm
(宽 × 高 × 深) · 包括盖子和
钉垫套件 38201.486

