

SecuFix 举宫器

订购信息



spirit of excellence



spirit of excellence



SecuFix 举宫器套件

包括：SecuFix 举宫器 (8370701)、带纵向刻度的 SecuFix 子宫探针 (8370702)、无菌 SecuFix 阴道透照器 (每包 10 个·无菌独立包装·41708370)、清洁刷 (6.05)、清洁刷 (6.09)、密封帽 (每包 10 个·89.02) 83707011



无菌 SecuFix 阴道透照器

(每包 10 个·无菌独立包装)
。套件包括：阴道透照器和真空管 (带止回阀、抽吸接头、Y 形适配器·用于在同一抽吸装置上使用抽吸器械、抽吸夹)、一次性产品..... 41708370

配件




Sims 子宫探针 8365.00



纤维导光束
纤维束直径 3.5 mm
(橙色标记)、
长度 2.3 m.....806635231




用于清洁机械的润洗管、
长度 600 mm..... 163915

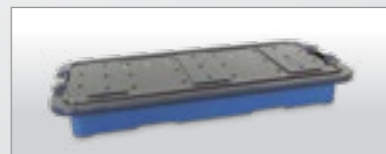

RIWO 系统收纳盒
器械容器·内部尺寸 (长 × 宽 × 高) :
500 x 200 x 60 mm ·
可蒸汽灭菌..... 38201.586

安全性的新曙光

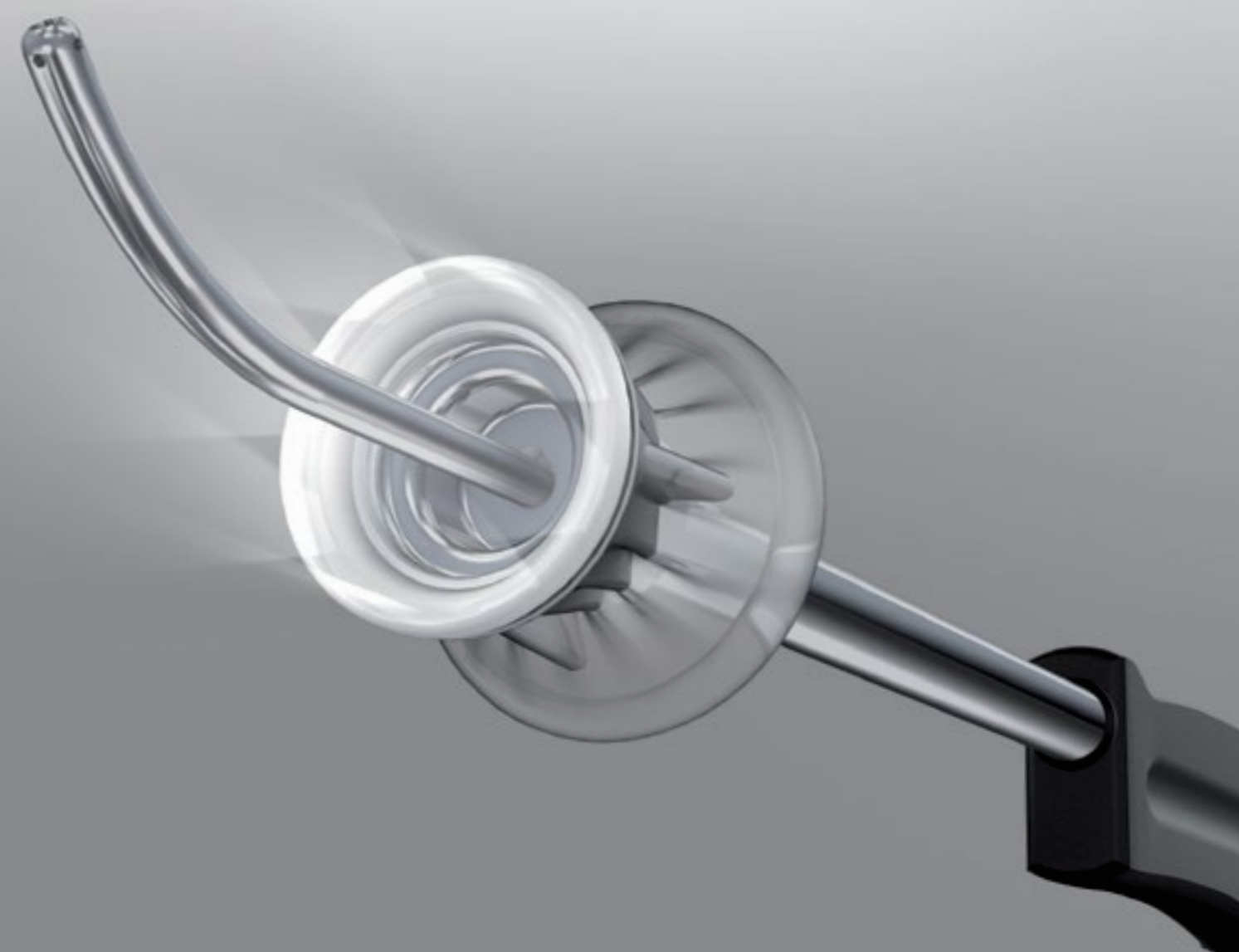

SecuFix 举宫器

采用阴道透视照明和
负压固定的开创性系统

E 636 IV/13.0B.1 KRAFT/JUNG.S 规格如有更改·恕不另行通知·



鉴于微创子宫切除术的发展及其良好的术后效果，当今的子宫切除手术大多可以借助腹腔镜来实施。

全新推出的 **SecuFix** 举宫器树立了新的安全标准。产品的新亮点主要包括：采用负压抽吸及“阴道透视照明”（即借助远端环形照明实现对子宫帽组织的可视化），可防止在固定时损伤子宫。这些亮点技术对于取得最佳手术效果并符合肿瘤学标准至关重要，例如，其能避免腹膜内肿瘤结构错位。

三重优势

SecuFix 采用模块化结构，仅包括三个部分，操作方便，成本效益高。


- 举宫器
- 带有纵向刻度的子宫探针
- 阴道透照器

阴道透照器是理想的操作平台


- 极易界定宫颈和阴道
- 穹窿清晰可见

稳定可控

SecuFix 举宫器采用稳定设计，器械可靠，外科医生可任意方向移动子宫。

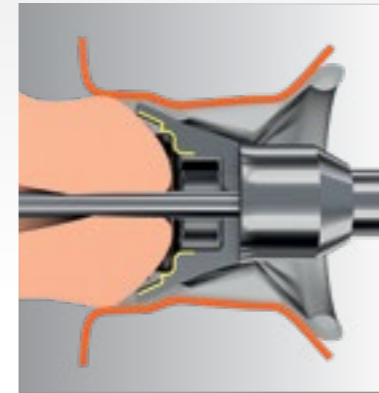

一种尺寸
多种用途

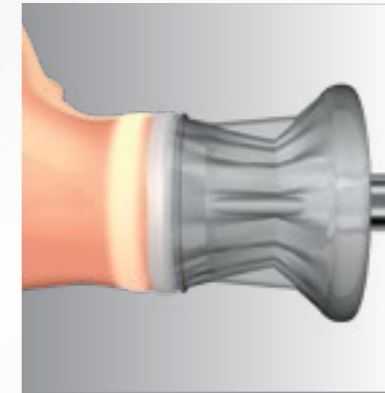

阴道透照器



真空固定

圆锥形举宫器顶端和渐变设计的举宫杯有助于容纳所有宫颈尺寸。阴道内弹性密封套可确保完美密封阴道，在整个介入期间维持气腹稳定。

环形照明可清晰呈现切割边缘，同时当探子在阴道中定位时可提供辅助性照明。

抽吸子宫和子宫颈可防创伤并牢固固定举宫器。这避免了腹膜内结构错位。



子宫探针的纵向刻度意味着可调整探针以探测不同宫颈长度，最大程度减少宫颈扩张。